

Swifty 2



Sitzverkleinerer

Montageanleitung – Zubehör



Seat minimizer

Assembly instructions – Accessory



1




2



3



4

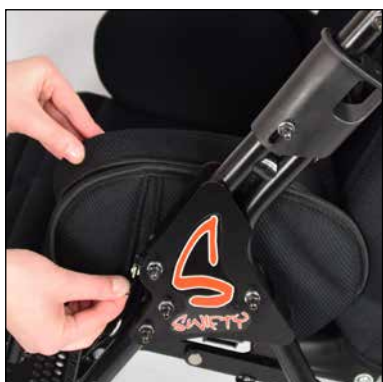

5



6



7




8



9



10

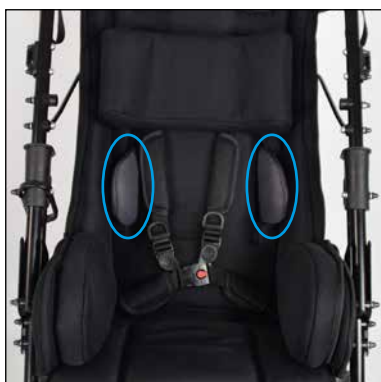

11

Der Sitzverkleinerer besteht aus 4 Teilen: Sitzkeil, Kopfpolster und zwei Sitzseitenführungspolstern. Es wird mit der Anbringung des Sitzkeils begonnen.

Sitzkeil

Zur Positionierung des Sitzkeils den Reißverschluss des Rückenpolsters öffnen und das Polster von der Rücken- und Sitzplatte entfernen. (Abb. 1) Den Sitzkeil mit dem breiteren Ende auf die Sitzfläche stellen, sodass dieser direkt an der Rückenplatte angelehnt ist. Nun kann der Klettstreifen vom Sitzkeil an die Sitzfläche angebracht und der Sitzkeil fixiert werden. (Abb. 2) Anschließend das Polster wieder über Sitz- und Rückenplatte ziehen und den Reißverschluss schließen.

Kopfpolster

Zunächst die Gurte der Oberkörperbegurtung von unten durch die Schnallen des Kopfpolsters führen und die Gurte auf der Rückseite der Rückenplatte an den Klappschnallen befestigen. (Abb. 3+4) Das Kopfpolster kann dann mit Hilfe der Schnallen in der Höhe positioniert werden.

Sitzseitenführungspolster

Den Reißverschluss der Sitzseitenführungspolster der Swifty 2 öffnen und vom Seitenblech entfernen. Anschließend die Sitzseitenführungspolster des Sitzverkleinerers über die Seitenbleche führen und die Reißverschlüsse schließen. Dabei darauf achten, dass die dicken Polster zur Innenseite des Buggys zeigen. (Abb. 5)

ACHTUNG: Beim Falten des Swifty 2 Reha-Buggys die Polster der Sitzseitenführung nach oben klappen, sodass sich die Polster zwischen Schiebegriffrohr und Rückenplatte schieben können. (Abb. 6-8)

TIPP: Zur noch besseren Positionierung des Kindes können noch zusätzlich die Thoraxpelotten eingesetzt werden. Dazu einfach die Pelotten an der Rückenplatte montieren und das Rückenpolster über die Pelotten führen. (Abb. 9+10) Alternativ können die senkrechten Schlitze im Rückenpolster aufgeschnitten und die Thoraxpelotten durch die Schlitze gesteckt und montiert werden. (Abb. 11)

The seat minimizer consists of 4 parts: seat wedge, head pillow and two seat side guide pads. It is started with the fixing of the seat wedge.

Seat wedge:

For positioning of the seat wedge, open the zipper of the back upholstery and remove the upholstery from the back and seat plate. (fig. 1) Put the seat wedge with the broader end on the seat, so that this is leaning directly against the back plate. Now stick the hook and loop strip of the seat wedge onto the seat plate and secure the seat wedge with the hook and loop. (fig. 2) Afterwards pull the upholstery over seat and backrest and close the zipper.

Head pillow:

First, guide the shoulder belts through the buckle of the head pillow from below and fasten the belts on the rear of the back plate. (fig. 3+4) Then the head pillow can be positioned in height with the help of the buckles.

Seat side guide pads:

Open the zipper of the seat side guide pads of the Swifty 2 and remove them from the side plates. Afterwards, pull the seat side guide pads of the seat minimizer over the side plates and close the zippers. Pay attention that the thick upholstery point to the inside of the buggy. (fig. 5)

ATTENTION: When folding the Swifty 2 rehab stroller, flip the upholstery of the seat side guide pads up, so that the upholstery can slide between push handle and back plate. (fig. 6-8)

TIP: For better positioning of the child, the lateral trunk support can be used in addition. Simply attach the pads on the back plate and laid the back upholstery over the pads. (fig. 9+10) Alternatively, the vertical slits in the back upholstery can be cut open to guide the lateral trunk supports through the slits. (fig. 11)



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com